BAR-Connector-System

Indikation:

Das BAR-Connector-System besteht aus einem rückstandslos verbrennbaren Stegformteil, Platzhaltern und Reitern aus dauerelastischem, hochpräzisem Kunststoff sowie einem Eindrückstift. Das BAR-Connector-Steg-Reiter-System wird vor allen Dingen für die Situation Eckzahn- zu Eckzahnwurzelkäppchen eingesetzt.

Indication:

The BAR-Connector-System consists of differently profiled bars made of burn out plastic, spacers and females made of a highly elastic and precise acrylic material. It has a wide application range and is often used in the situation as shown.

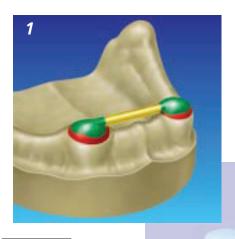


Fig. 1:
Suchen Sie aus den Stegen den für den vorliegenden Fall geeigneten Steg.

Fig. 1:

Choose the most suitable bar for the existing situation.

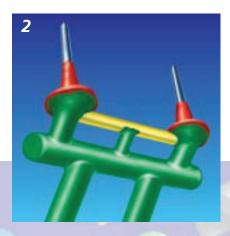


Fig. 2:
Zunächst wird das Stegformteil dem Kieferkammprofil angepaßt, gegebenenfalls für Unterspülbarkeit sorgen. Danach wie gewohnt einbetten, gießen und ausarbeiten.

Fig. 2:

Adapt the profile to the jaw ridge taking care of hygienic aspects. Then invest and cast as usual.





Fig. 3, 4: Der Steg kann in jeder gewünschten Legierung gegossen werden.



Fig. 3, 4:
The bar can be cast in any alloy.

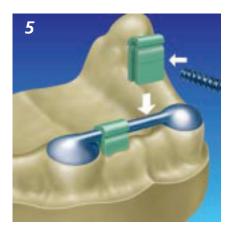


Fig. 5, 6:

Platzhalter auf den Steg aufsetzen und anpassen, dann anwachsen. Nun die Prothese in gewohnter Weise modellieren, einbetten, stopfen und ausarbeiten. Die Platzhalter verbinden sich nicht mit dem Prothesenkunststoff und können leicht entfernt werden.

Bei Bedarf eine INOX-Außenhülse aufschieben.

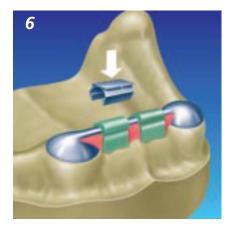


Fig. 5, 6:

Place spacers over the bar adapting to the gingiva and fill out the undercuts. Now finish the denture.

The spacers do not bond to the resin and can be removed easily. It is also possible to use a metal housing over the spacers.



Fig. 7:

Nach Fertigstellung werden die Platzhalter entfernt und die Reiter mit Hilfe des Eindrückstiftes in die Hohlräume der Prothese positioniert. Es stehen verschiedene Sorten Reiter zur Verfügung: gelbe für starre und orange für resilierende Verbindungen, außerdem drei mit verringertem Innendurchmesser.

After completely finishing the denture remove the spacers and, using the insertion tool, position the females into the provided space. There is a choice of different females. Yellow would be for a rigid and orange for a resilient situation. There are three females with reduced inside diameter to choose from, if there should be a loss of friction.

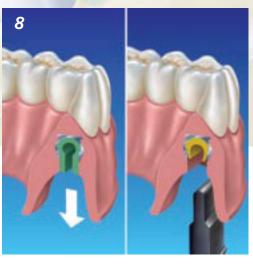


Fig. 8:

Hier wurde die INOX-Außenhülse verwendet. Verarbeitung wie unter Fig. 6 beschrieben.

In this case a metal housing was used. Process as shown in fig. 6.

BAR-Connector-System



Set bestehend aus / Consisting of: 2 Profilstege / Profiled bars 6 Universalreiter / Females 6 Platzhalter / Spacer 1 Eindrückstift / Insertion tool

Set starr / Rigid: Art.: 86379

Set resilierend/ Resilient:

Art.: 86377



Set bestehend aus / Consisting of: 2 Rundstege / Round bars 6 Universalreiter / Females 6 Platzhalter / Spacer 1 Eindrückstift / Insertion tool

Set starr / Rigid: Art.: 69970

Set resilierend/ Resilient: Art.: 69971



Set bestehend aus / Consisting of: 2 Tropfenstege / Drop shaped bars 6 Universalreiter / Females 6 Platzhalter / Spacer 1 Eindrückstift / Insertion tool

Set starr / Rigid: Art.: 69968

Set resilierend/ Resilient:

Art.: 69969



Profilsteg / Profiled bar (6 Stück / pieces)

Rundsteg / Round bar

(6 Stück / pieces)

Art.: 69974

Tropfensteg /

Art.: 69973

Drop shaped bar

(6 Stück / pieces)

Art.: 69972



Universalreiter / Females ø außen / Outer diam. 3,2 mm ø innen / Inner diam. 1,8 mm (6 Stück / pieces)

Art.: 86378



Universalreiter / Females resilierend / resilient ø außen / Outer diam. 3,2 mm ø innen / Inner diam. 1,9 mm (6 Stück / pieces)

Art.: 69975



Universalreiter / Females ø außen / Outer diam. 3,2 mm ø innen / Inner diam. 1,6 mm (6 Stück / pieces)

Art.: 86374



Universalreiter / Females ø außen / Outer diam.3,2 mm ø innen / Inner diam. 1,5 mm (6 Stück / pieces)

Art.: 86375



Universalreiter / Females ø außen / Outer diam.3,2 mm ø innen / Inner diam. 1,4 mm (6 Stück / pieces)

Art.: 86376



Platzhalter / Spacer (6 Stück / pieces)

Art.: 69976



Außenhülse, Titan Metal housing, Titanium (4 Stück / pieces)

Art.: 86373 / 1T



Außenhülse, Inox Metal housing, Inox (4 Stück / pieces)

Art.: 86373 / 1



Eindrückstift / Insertion tool (1 Stück / piece)

Art.: 69978