

DT EQUATOR
EASY
Fix

ακίνητη προσθετική
χωρίς βίδες
από την Rhein83

**SNAP-ON
CONNECTION**

Γιατί Easy Fix;

Χωρίς προσθετικές βίδες ✓

Μόνωση του κολοβώματος με το T-Base ✓

Ατραυματική αφαίρεση με το ειδικό εργαλείο ξεκλειδώματος ✓

Ένθεση της πρόσθεσης μέχρι και 60° απόκλιση εμφυτευμάτων ✓

Απλουστευμένο πρωτόκολλο υγιεινής ✓




ΦΛΩΡΟΣ DENTAL^{plus}

RHEIN83

Πλεονεκτήματα του Easy-Fix


► 1 Εύκολη αφαίρεση της προσθετικής

Για να αφαιρέσετε την πρόσθεση Easy Fix, χρειάζεται μόνο μία ελεύθερη οπή, για την τοποθέτηση του εργαλείου απελευθέρωσης. Βιδώνοντας το εργαλείο στο Easy Fix T-Base, η πρόσθεση θα ανυψωθεί επιτρέποντας την εύκολη και ατραυματική αφαίρεσή της.

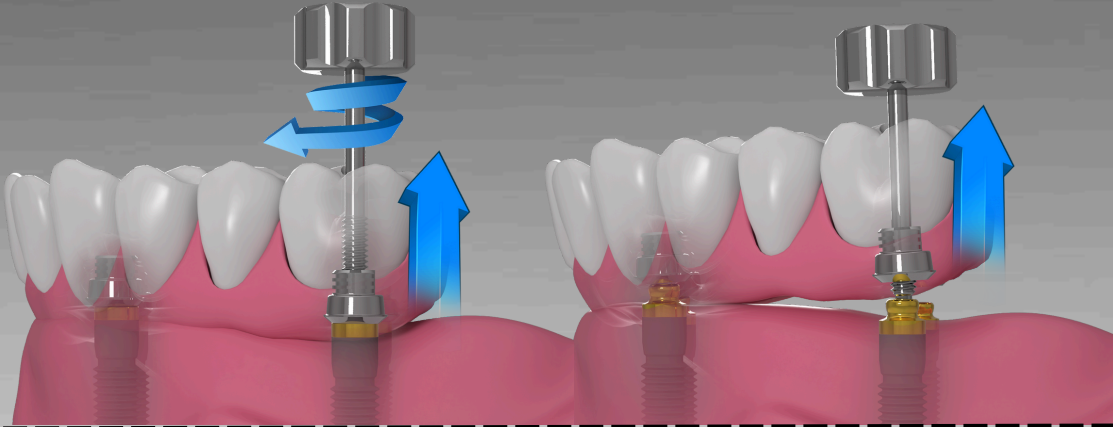

► 2 Επιλέξτε που θα είναι η οπή απελευθέρωσης

Χρησιμοποιώντας το σύστημα Easy Fix, έχετε την επιλογή να αφήσετε μόνο μία οπή απελευθέρωσης, στην πιο αισθητικά και λειτουργικά βολική θέση για την προσθετική σας εργασία.

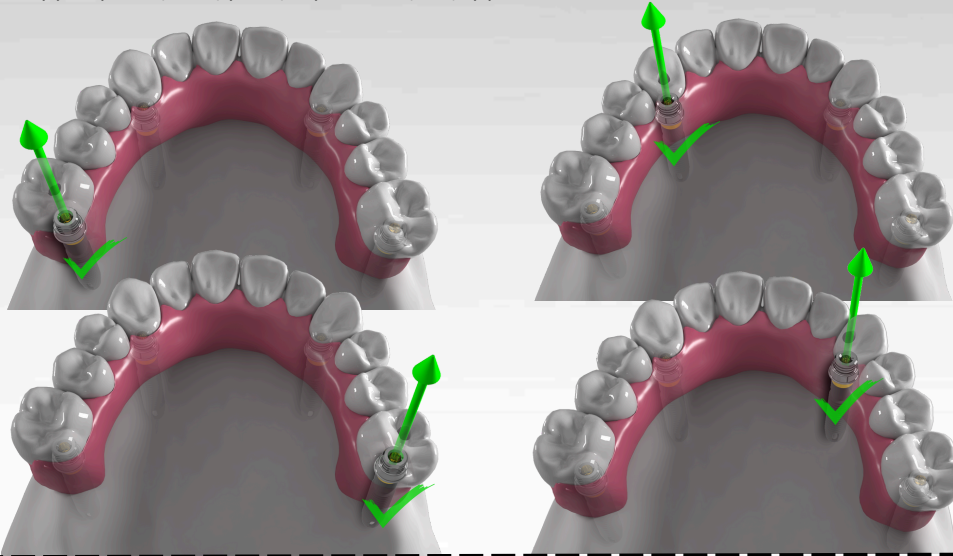

► 3 Διαχείριση της εφαρμογής

Χάρη στους τρεις διαφορετικούς βαθμούς συγκράτησης του δακτύλιου Seeger, μπορείτε να διαχειριστείτε την επιθυμητή συγκράτηση της πρόσθεσης, σε σχέση με τον αριθμό των εμφυτευμάτων.


Προαιρετική βίδα σφραγίσματος

Για χρήση στην οπή απελευθέρωσης.



Εργαλείο τοποθέτησης Seeger

Ο δακτύλιος Seeger τοποθετείται μέσα στο T-Base Easy Fix με το ειδικό εργαλείο. Το άνοιγμα του seeger θα αντιστοιχεί προς την μέγιστη κλίση του εμφυτεύματος.

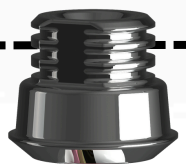

‘Δυνατός’ δακτύλιος Seeger



‘Μεσαίος’ δακτύλιος Seeger




‘Μαλακός’ δακτύλιος Seeger




Εργαστηριακός δακτύλιος Seeger




Κατασκευή σκελετού Easy Fix: Χρήση αναλογικού πρωτοκόλλου

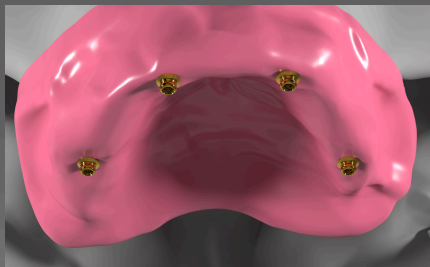


Οι σύνδεσμοι Ot Equator τοποθετημένοι στο στόμα του ασθενή.

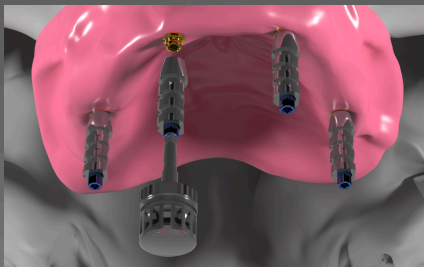


Βιδώστε τους άξονες μεταφοράς τιτανίου, στα Ot Equator, για την λήψη αποτυπώματος.

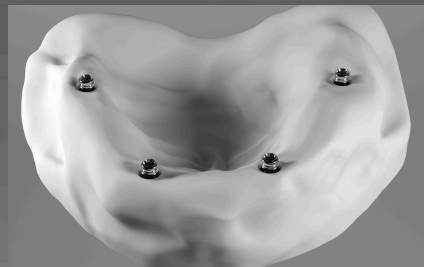


Το γύψινο εκμαγείο με τα εργαστηριακά ανάλογα.

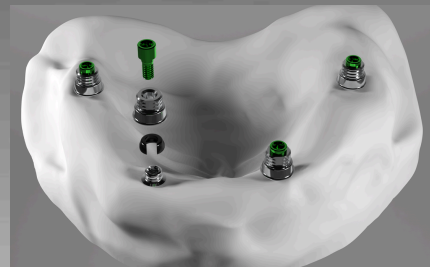


Το εκμαγείο με τα Easy Fix T-Base, τις βίδες σταθεροποίησης και τα εργαστηριακά seeger.

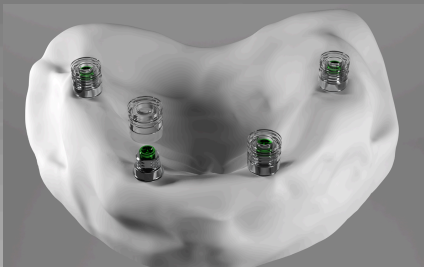

Τοποθετήστε τις χυτευόμενες καλύπτρες στα Easy Fix T-Base.

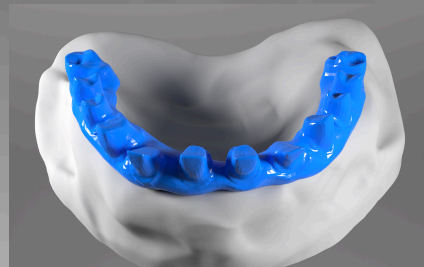

Κατασκευή του σκελετού.

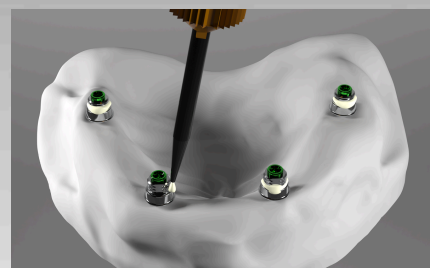

Ενσωμάτωση των Easy Fix T-Base μέσα στον μεταλλικό σκελετό με την κόλλα Ot Cem.




Ο μεταλλικός σκελετός με τα T-base κολλημένα.




Τελειωμένη εργασία με μία οπή απελευθέρωσης στην θέση 16 *


Κατασκευή σκελετού Easy Fix: Χρήση ψηφιακού πρωτοκόλλου

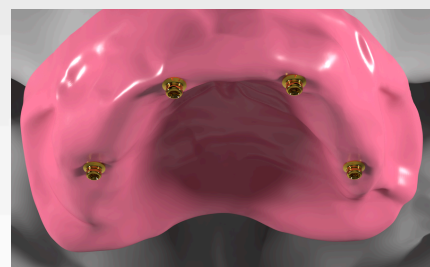


Οι σύνδεσμοι Ot Equator τοποθετημένοι στο στόμα του ασθενή.

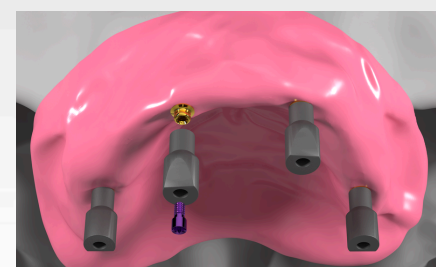


Βιδώστε τα κολοβώματα σκαναρίσματος στα Ot Equator, για λήψη ψηφιακού αποτυπώματος με ενδοστοματικό scanner.

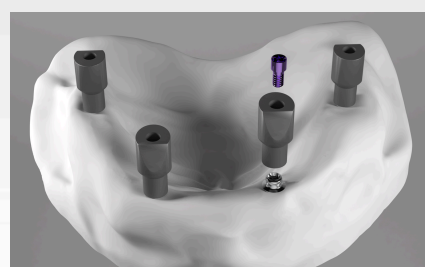

Το εκμαγείο εργασίας με τα εργαστηριακά ανάλογα.

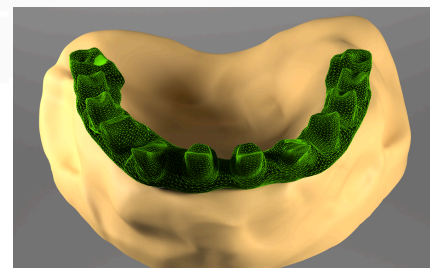


Κατασκευή του σκελετού με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες.

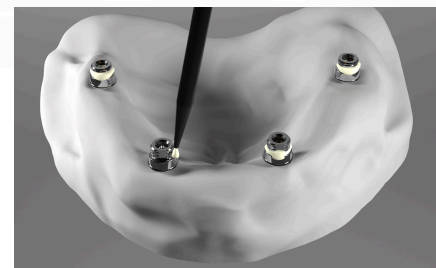

Ενσωμάτωση των Easy Fix T-Base μέσα στον μεταλλικό σκελετό με την κόλλα Ot Cem.



Ο μεταλλικός σκελετός με τα T-base κολλημένα.

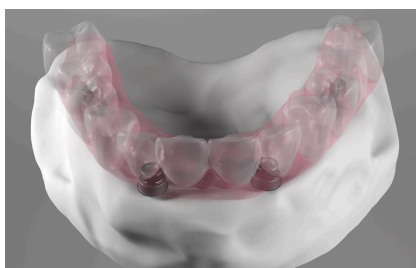


Τα Easy Fix T-Base στην θέση τους στην τελειωμένη εργασία.



Τελειωμένη εργασία με μία οπή απελευθέρωσης στην θέση 16 *

OT EQUATOR EASY Fix

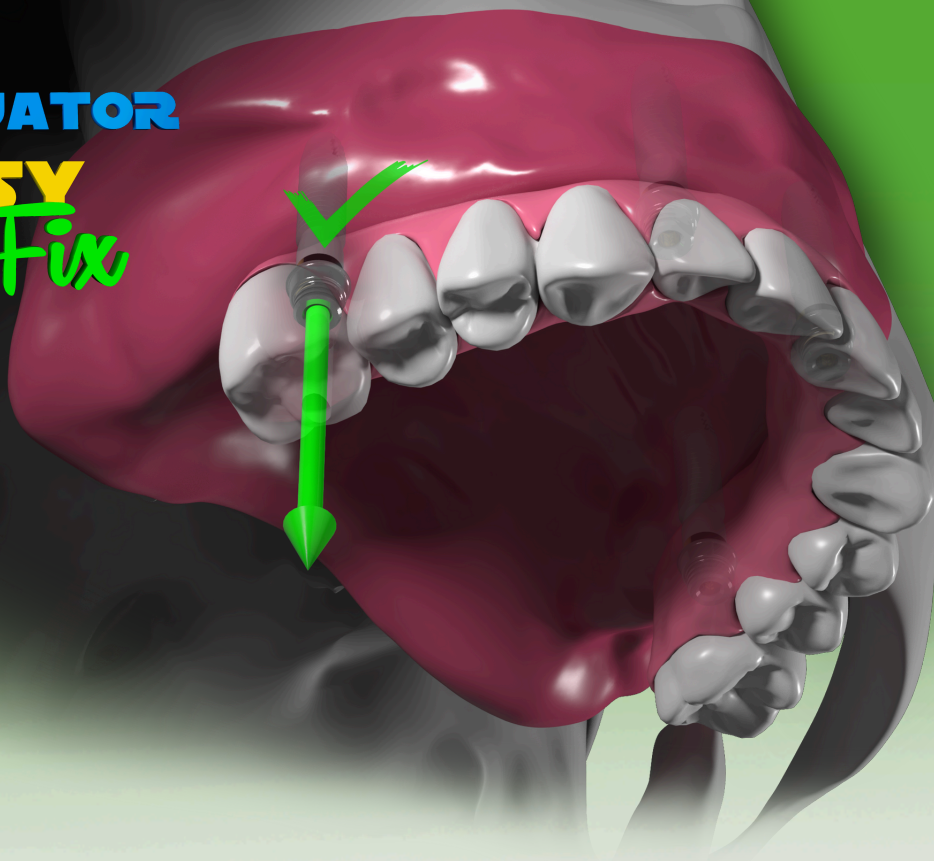

Κολόβωμα OT Equator

Ref. 030




Easy Fix Kit
T-Base h 4mm

Ref. KMSRF



Easy Fix Kit
T-Base h 6mm

Ref. KMASRF

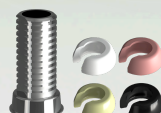

Easy Fix Kit
T-Base h 9mm

Ref. KMLSRF



Easy Fix Seeeger Kit

Ref. KSEF



Ρατσέτα με
ένδειξη ροπής

Ref. 760CER-US



"Δυνατό" Seeeger

Ref. KSST



"Μεσαίο" Seeeger

Ref. KSM



"Μαλακό" Seeeger

Ref. KSSO



"Εργαστηριακό" Seeeger

Ref. KSL



Κατσαβίδι OT Equator

Ref. 776CGC



Μακρύ κατσαβίδι
OT Equator

Ref. 777CGL



Εργαλείο απελευθέρωσης

Ref. 761EEF



Μακρύ εργαλείο
απελευθέρωσης

Ref. 761ELEF



Εργαλείο τοποθέτησης

Ref. 491SEIM



Easy Fix T-Base h 4mm

Ref. RMEF



Easy Fix T-Base h 6mm

Ref. RMAEF



Easy Fix T-Base h 9mm

Ref. RMLEF



Χυτευόμενη καλύπτρα
h 4mm

Ref. 240GCEF



Χυτευόμενη καλύπτρα
h 6mm

Ref. 240GCAEF



Χυτευόμενη καλύπτρα
h 9mm

Ref. 240GCLEF



Βίδα κάλυψης

Ref. 149TEF



Βίδα σφραγίσματος

Ref. 149VEF



Βίδα διατήρησης χώρου

Ref. 239VEF



Ανάλογο OT Equator

Ref. 144AE



Ανάλογο για εκτυπωμένο
εκμαγείο

Ref. 144AVC4



Κολόβωμα σκαναρίσματος

Ref. 145SAE



Άξονας αποτύπωσης

Ref. 144TLE



Ρητινώδης κονία OT Cem

Ref. 149OC



Εργαλείο τοποθέτησης, δοκιμής
και εξαγωγής seeeger

Ref. 491EEF



ΦΛΩΡΟΣ DENTAL plus

Εγνατία 88, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 224203
www.florosdental.gr - florosdental@otenet.gr



Via E. Zago 10/abc 40128 Bologna (Italy) Tel. +39 051244510
www.rhein83.com - direzione@rhein83.it